


Analyses scientifiques des découvertes archéologiques : Tests palynologiques

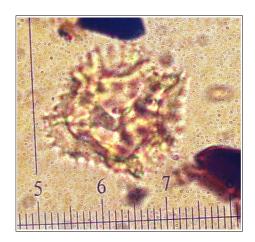

Tests palynologiques réalisés sur cinq prélèvements de l'opération archéologique « Rue du Quatorze Juillet », à Chartres (28)

Conseil Départemental d'Eure et Loir, Service de l'archéologie préventive

Rapport sur les tests palynologiques

Mars 2019

Conseil Départemental d'Eure et Loir,

Service de l'archéologie préventive, 1 allée du Général Martial Valin, Chartres 28000

Opération archéologique « Rue du Quatorze Juillet » à Chartres (28) Rapport des tests palynologiques de cinq prélèvements Références des échantillons étudiés : Cuve 1, prélèvements 1765, 1766, 1815, 1817, 1825 Loïc GAUDIN membre associé à l'UMR 6566 CReAAH et chargé de cours l'Université de Rennes 1 E-mail: loic.gaudin@arkeomap.com Site web : arkeomap.com **Mars 2019**

Illustration de la page de couverture : Pollen de Cichorioïdée observé dans le prélèvement n° 1766. Grossissement x1000.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
1. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS, STRATIGRAPHIE et OBJECTIFS	
2. TRAITEMENT CHIMIQUE et OBSERVATION DES ECHANTILLONS	
2.1 Le protocole d'extraction utilisé	6
2.2 Les comptages et déterminations	7
3. RESULTATS DES TESTS	
4. PRECONISATIONS	11
5. BIBLIOGRAPHIE	13
6. ANNEXE	14
6.1. Détail du protocole d'extraction utilisé :	14
6.2. Description des échantillons et des traitements	17

INTRODUCTION

Ce document présente les résultats des tests palynologiques de cinq prélèvements réalisés lors de l'opération archéologique « du Quatorze Juillet » à Chartres (28). La fouille révéla un site occupé dès la période augustéenne et au moins jusqu'au IIe siècle.

Ce rapport vise à estimer le contenu palynologique des prélèvements dans l'optique de faire des analyses plus approfondies.

Le site a été fouillé par le Service de l'archéologie préventive sous la direction de Monsieur Pierre Perrichon. L'étude a été commandée par le service avec l'accord de son directeur Monsieur Hervé Selles.

1. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS, STRATIGRAPHIE et OBJECTIFS

Cinq prélèvements ont été réalisés directement en stratigraphie, par US (Fig. 1)

De façon générale les structures ne présentaient pas de conditions anaérobies permanentes (ex. nappe d'eau), ce qui rend la conservation des pollens aléatoire.

En ce qui concerne le contexte environnemental, selon P. Perrichon « nous sommes à Chartres aux confins de l'urbanisation et à proximité du grand fossé qui enceint la villa antique d'Autricum du Haut Empire. La nature de l'occupation au sein de l'emprise de fouille se compose d'une activité de gestion des déchets de l'agglomération (rejets domestiques mais aussi artisanaux) et d'une activité artisanale de métallurgie et peut-être de boucherie dans sa forme industrielle. Le contexte plus précis où ces prélèvements ont été collectés correspond à une zone vide d'habitat comprise entre le grand fossé et l'amorce de l'urbanisation. Donc une zone ouverte nue probablement ou en friche (peu probable). Nous sommes à la jonction entre le plateau et le départ de la vallée des Vauroux.

Les couches correspondant aux prélèvements sont, de la plus récente à la plus ancienne, l'Us 1815 (sol extérieur), l'Us 1765 (sol extérieur), l'Us 1817 (sol extérieur), l'Us 1825 (sol extérieur ou comblement final de structure) et l'Us 1766 (comblement de structure). »

L'objectif de cette étude vise à obtenir une description du paysage végétal durant les périodes d'occupation du site.

Code opération	US – Numéro de prélèvement	Structures	Masse envoyées pour traitement (g)	Description sédimentaire visuelle
Chartres (28) - Rue du Quatorze Juillet	PLV 1765	Cuve 1	80	Couche organo – minérale. Dominance minérale
	PLV 1766	Cuve 1	112	Couche organo – minérale. Dominance minérale
	PLV 1815	Cuve 1	125	Couche organo – minérale. Dominance minérale
	PLV 1817	Cuve 1	165	Couche organo – minérale. Dominance minérale
	PLV 1825	Cuve 1	125	Couche organo – minérale. Dominance minérale

Figure 1. Inventaire des prélèvements étudiés

2. TRAITEMENT CHIMIQUE et OBSERVATION DES ECHANTILLONS

2.1 Le protocole d'extraction utilisé

L'extraction pollinique a été réalisée au sein du laboratoire de l'UMR CNRS 5805 EPOC (Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux) à l'université de Bordeaux.

Le protocole utilisé est détaillé en annexe (chapitre 6.1.).

2.2 Les comptages et déterminations

Les pollens ont été observés au sein du laboratoire ARKEOMAP. L'observation des extractions a été réalisée sous microscope optique à immersion aux grossissements x500 et x1000 (microscopes OLYMPUX CX21 et CX40).



Figure 2. Microscope d'observation (Olympus CX 21, ArkéoMap)

Les outils utilisés pour les déterminations sont de plusieurs sortes :

- des lames de référence du Laboratoire de l'UMR 6566 « CReAAH », de pollens actuels portant principalement sur la flore hygrophile des marais,
- des clichés photographiques pris au microscope optique et électronique,
- de l'atlas photographique « pollens et spores d'Europe et d'Afrique du Nord » (Reille, 1992).

Le nombre de grains de pollens et de spores comptés par échantillon peut être variable en fonction des conditions de conservation et de la nature des sédiments. L'objectif de cette pré-étude étant avant tout d'estimer le potentiel palynologique, nous n'avons pas cherché à atteindre le nombre de 300 pollens préconisé par M. Reille (1990).

Nous nous sommes néanmoins attachés à quelques règles et indices pour estimer le contenu palynologique :

- le balayage d'une dizaine « d'allers-retours » de la lamelle,
- un minimum d'une à deux heures a été consacré au balayage de chaque lamelle.

Nous avons aussi calculé des fréquences polliniques absolues afin d'estimer le nombre de grains par volume (mL) de sédiment. Nous nous sommes basés pour cela sur une méthode préconisant l'introduction de pastilles de Lycopodes au nombre connu dans les préparations (Stokmarr, 1972).

Remarque par rapport à la détection des microfossiles non-polliniques (MNP) :

Le parcours des lames polliniques permet souvent d'observer des microfossiles nonpolliniques. Ils peuvent être d'origines diverses : spores algales, ascospores fongiques, fructifications, restes de métazoaires, œufs ou kystes de parasites, ...

Il n'est pas toujours possible de déterminer ces microfossiles. Néanmoins, nous nous sommes basés sur les inventaires de Van Geel *et al.* (2006) et C. Cugny (2011) pour identifier certains microfossiles et ainsi compléter l'interprétation des résultats polliniques. La typologie adoptée est celle initiée par B. van Geel, réutilisée et complétée par C. Cugny (2011).

3. RESULTATS DES TESTS

Les résultats des tests sont donnés sous la forme d'un tableau de comptages représentant les effectifs des différents pollens, spores et quelques microfossiles non polliniques (MNP) identifiés (Figure 3) .

	Taxons \ Code Prélèvements	PRV 1766	PRV 1825	PRV 1817	PRV 1765	PRV 1815
	Pinus	0	0	1	0	0
	POACEAE	2	1	0	1	0
Pollens	CICHORIOIDEAE	9	1	0	1	1
<u> </u>	ASTERACEAE	0	0	0	0	1
∐ Ğ	Plantago	1	0	0	0	0
	RANUNCULACEAE	1	0	0	0	0
	CYPERACEAE	0	0	0	1	0
	Spore monolète	4	6	12	11	21
Spores	Spore trilète	0	0	0	0	2
	Concentricyste	0	0	1	0	0
	Spores algales	0	0	2	0	0
	Amérospores – TM-382	2	0	0	1	0
Non pollinique	Amérospores – HdV-207	0	1	2	0	0
	Amérospores – HdV-27	4	0	0	2	0
	Dictyospores – TM-329	0	0	1	0	0
	Micro charbons	0	0	0	4	0
	Indéterminés	1	0	0	2	0
	SOM. pollen (somme de base)	13	2	1	3	2
	SOM. Sporo-pollinique	17	8	13	14	25
	CONC. ABS Pollen (nb / cm3)	1993	745	64	745	274
	CONC. ABS Pollen et Spores (nb / cm3)	2606	2978	836	3475	3429

Figure 3. Opération archéologique « Rue du Quatorze Juillet » de Chartres (28). Comptages correspondant aux pollens et spores déterminés dans chacun des 5 prélèvements testés. Les valeurs grisées correspondent à des sommes polliniques, sommes sporo-polliniques et pour les deux dernières lignes à des concentrations absolues de pollens et de spores + pollens. Les concentrations absolues sont exprimées en nombre de grains par volume (mL) de sédiment.

		Nombre de		Concentration	Concentration					
	Nombre de	pollens et	Lycopodes	absolue	absolue					
Code des	pollens	spores	introduits	pollen et	pollen	Etat de	Diversité		Ordre d	de
prélèvements	comptés	comptés	comptés	spores	uniquement	conservation	taxonomique	Remarque	priorité	
PRV 1765	3	14	21	3475	745	Très mauvais	4		5	
PRV 1766	13	17	34	2606	1993	Mauvais	5		4	
PRV 1815	2	25	38	3429	274	Très mauvais	4		5	
PRV 1817	1	13	81	836	64	Très mauvais	2		5	
PRV 1825	2	8	14	2978	745	Très mauvais	3		5	

Figure 4. Opération archéologique « Rue du Quatorze Juillet » de Chartres (28). Tableau synthétisant les sommes, les concentrations absolues en spores et pollens (en nb/mL de sédiment) ainsi que la diversité taxonomique de chaque prélèvement. Quelques faits remarquables sont aussi indiqués. Un ordre de priorité d'analyses des échantillons est proposé en tenant compte de ces résultats.

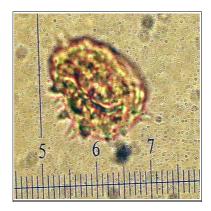


Figure 5. Opération archéologique « Rue du Quatorze Juillet » de Chartres (28). Photographie d'un pollen d'Asteracée, grossissement x1000, prélèvement 1815.

4. PRECONISATIONS

L'observation des échantillons a livré des résultats pauvres en microrestes (les concentrations absolues n'excèdent pas 2000 pollens / mL ce qui est très peu comparé aux concentrations obtenues dans des dépôts organiques, souvent supérieurs à 50000 pollens / mL). Seulement sept taxons polliniques, deux types de spores et quelques microfossiles non polliniques ont été identifiés lors de ces tests (Fig. 3 et 4). Le prélèvement de l'US 1766 a permis d'observer « un peu plus » de pollens que les quatre autres, mais l'ensemble pollinique reste très pauvre.

La détection systématique et relativement importante des spores de Lycopodes exotiques, introduits dans les volumes extraits (de 14 à 81 Lycopodes comptés, Figure 4), témoigne de la réussite du traitement physico-chimique d'extraction du matériel sporo-pollinique. Ce constat montre aussi que la faiblesse du stock pollinique tient à la pauvreté des sédiments et non à la méthodologie employée pour l'extraction.

Le temps de contact entre la pluie pollinique et les couches archéologiques est un facteur qui a pu jouer pour expliquer ces résultats. Tout dépend de la durée de fonctionnement, de la dynamique (vitesse) de comblement sédimentaire de ces structures.

L'autre facteur important est le contexte de conservation pollinique. De nombreuses « enveloppes polliniques » et débris polliniques ont été constatés sans qu'il soit possible d'identifier les taxons. Les quelques grains observés correspondent à des taxons résistants à la corrosion comme par exemple les Cichorioïdées, les spores monolètes (Fig. 3). La nature des sédiments à dominance minérale laisse penser que les pollens se sont trouvés dans des contextes aérobies propices à l'oxydation biologique ou physico-chimique.

Les quelques pollens et spores identifiés notamment dans le prélèvement de l'US 1766, correspondent essentiellement à des végétations herbacées. De rares occurrences polliniques témoignent de végétations humides et de boisements :

- Pour ce qui concerne les végétations herbacées nous avons détecté quelques grains de graminées (Poacées) accompagnés de Cichorioïdées, plantains (*Plantago sp.*) et renonculacées (*Ranunculaceae*) pouvant correspondre à des végétations de prairies ou friches et jachères. Les effectifs observés sont évidemment trop faibles pour pouvoir davantage affiner l'image des associations végétales environnantes.
- Un fragment de pollens pin (*Pinus sp.*) a été détecté dans le prélèvement n° 1817. Le pin est connu pour sa forte production et importante diffusion pollinique. Le pollen est peut-être d'origine lointaine.
- Les pollens de Cyperacées et de Poacées pourraient témoigner de zones humides (ex. Prairies humides).
- Enfin, notons l'identification de quelques microfossiles non polliniques : des « amérospores du type TM-382, HdV-207, HdV-27 » et « Dictyospores du type TM-329 ». Ce sont des microrestes d'origine fongique (champignons) mais dont la signification écologique n'est pas toujours très claire.

Notons aussi quelques microrestes d'origine algale (dont un reste de Concentricyste). Ils pourraient caractériser des zones d'eau stagnante peu profondes.

En revanche, nous n'avons pas observé de taxons allochtones (ex. céréales), indicateurs directs de plantes cultivées.

Compte tenu de la pauvreté pollinique, il faut interpréter ces résultats avec beaucoup de précaution.

Au regard de l'état de conservation global des pollens, de la diversité observée, la poursuite de l'analyse de ces échantillons parait peu pertinente (Fig. 6).

Code	Ordre	de
prélèvements	priorité	
PRV 1765	5	
PRV 1766	4	
PRV 1815	5	
PRV 1817	5	
PRV 1825	5	

Figure 6. Opération archéologique « Rue du Quatorze Juillet » de Chartres (28), tableau récapitulant l'ordre de priorité des analyses palynologiques.

5. BIBLIOGRAPHIE

CUGNY C., 2011 – Apport des microfossiles non-polliniques à l'histoire du pastoralisme sur le versant nord pyrénéen. Entre référentiels actuels et reconstitution du passé. Thèse de doctorat, Université Toulouse 2 Le Mirail, 2 vol., 373 p.

REILLE M., 1990 – Leçon de palynologie et d'analyse pollinique. CNRS, Paris, 206 pages.

REILLE M., 1992 - Pollen et spores d'Europe et d'Afrique du Nord., Editions Louis-Jean, Gap, 520 p.

STOCKMARR J., 1972 – Tablets with spores used in absolute pollen analysis. *Pollens et spores*, 13, p. 615-621.

VAN GEEL B., APTROOT A., 2006 – Fossil Ascomycetes in Quaternary deposits. Nov Hedw, 82, p. 313-329.

6. ANNEXE

6.1. Détail du protocole d'extraction utilisé :

Afin d'isoler et de concentrer les grains de pollen, le protocole utilisé au sein de l'UMR EPOC comporte les étapes suivantes :

Préparation du sédiment

1- Le sédiment (environ 5g) est séché à l'étuve à 40°C pendant une nuit ou plus, suivant la teneur en eau.

Estimation du volume de sédiment

2- Dans une éprouvette de 25cc en polypropylène, mettre 15cc d'eau distillée. Poser celle-ci sur une balance, faire la tare, puis ajouter le sédiment. La colonne d'eau augmente, enregistrer le poids ainsi que le volume.

Lavage du sédiment

Ce lavage permet de travailler sur deux proxies. La fraction supérieure est récupérée pour, en particulier, l'étude des foraminifères, et la fraction inférieure pour l'étude des pollens et dinoflagellés.

3- Prendre un tamis de maille 150µm et de diamètre 10cm, le poser sur un bécher de 1000ml. Vider le contenu de l'éprouvette sur le tamis, et laver délicatement à l'eau du robinet. Lorsque le résidu > à 150µm est propre, bien le rincer à l'eau distillée et le récupérer dans une coupelle toujours avec de l'eau distillée. La fraction inférieure récupérée dans le bécher est mise à décanter pendant 48h minimum. Ne pas oublier de couvrir les bécher pour éviter toute pollution.

Attaque à l'acide chlorhydrique (HCI)

Cette attaque permet d'éliminer tous les organismes et particules calcaires.

- **4-** Aspirer l'eau à l'aide d'une trompe à vide. Celle-ci est équipée, à l'extrémité du tuyau, d'un embout en plastique présentant un angle de 90° par rapport à la paroi du bécher. Cet embout permet d'éviter toute aspiration accidentelle du résidu décanté au fond du bécher. Récupérer le résidu dans un tube de 100ml à fond rond en polypropylène.
- **5-** Centrifuger 7mn à 2500tr/mn. Eliminer l'eau, remettre en suspension avec l'agitateur. Mettre une ou deux pastilles de Lycopodes dans le tube, le nombre de pastilles étant défini en fonction de la concentration supposée en pollen ou en dinoflagellés. Elles permettent d'estimer les concentrations en palynomorphes.
- **6-** L'attaque à l'HCl **à froid** se fait en trois étapes. Une première attaque à **10%**, remuer à l'aide d'une baguette d'agitation en verre, laisser agir quelques minutes, si le sédiment est riche en carbonates il est important de commencer par l'HCl à faible concentration afin d'éviter une importante effervescence et également un débordement des tubes. Continuer par de l'HCl à **25%** attendre quelques minutes et terminer par de l'HCl à **50%**. Cette dernière attaque est essentielle pour la suite de la manipulation. Bien s'assurer que la réaction est terminée en ajoutant de l'HCl à 50%. Lorsqu'il n'y a plus d'effervescence dans le tube, la réaction est terminée.

Attaque à l'acide fluorhydrique (HF)

Cette attaque permet d'éliminer la silice et les silicates.

- **7-** Centrifuger les tubes de 100ml pendant 7mn à 2500tr/mn et éliminer le surnageant. Remettre le culot en suspension avec l'agitateur, puis mettre environ 40 à 50cc d'HF à **45% à froid**. Fermer les tubes avec le bouchon approprié et les poser sur le secoueur, laisser agiter pendant 4 à 5h. Bien respecter la concentration de l'HF, car une concentration supérieure peut entraîner une forte effervescence, avec risque de perte de sédiment.
- **8-** Centrifuger à nouveau les tubes, 7mn à 2500tr/mn, éliminer le surnageant. Remettre en suspension avec l'agitateur, puis mettre environ 40 à 50cc d'HF à **70% à froid**. Poser les tubes sur le secoueur, laisser agiter pendant **28 à 30h**.

Note : Attention pour faire cette manipulation il est impératif de respecter les mesures de sécurité, mettre des longs gants, ainsi que des lunettes. Travailler toujours sous hotte aspirante bien fermée. Travailler également les tubes toujours fermés.

Deuxième attaque à l'acide chlorhydrique (HCI)

Elimination des fluorosilicates.

9- Centrifuger les tubes, 7mn à 2500tr/mn, éliminer le surnageant. Remettre en suspension avec l'agitateur, puis mettre environ 40 à 50cc d'HCL à **25% à froid**. Poser les tubes sur le secoueur, laisser agiter pendant 15mn.

Note : Il est très important de faire cette attaque à l'HCl avant de rincer à l'eau distillée. Des risques de formation de fluorures peuvent avoir lieu et donc gêner le reste de la manipulation.

<u>Rinçage</u>

10- Centrifuger les tubes, 7mn à 2500tr/mn, éliminer le surnageant. Remettre en suspension le culot avec l'agitateur, remplir les tubes d'eau distillée. Centrifuger les tubes, 7mn à 2500tr/mn. Eliminer l'eau, les résidus sont prêts pour la filtration.

Filtration

Cette opération nécessite la mise en œuvre d'un système de filtration. Ce matériel est posé sur une fiole à vide de 2l reliée à une trompe à vide.

- **11-** Remettre en suspension le culot avec l'agitateur et verser une partie ou la totalité du résidu, suivant la concentration, sur le filtre en nylon de maille 10μm. Rincer à l'eau distillée avec une pissette de 50ml. La contenance de la pissette est essentielle car elle permet de l'avoir bien en main et donc de presser suffisamment fort pour avoir un jet assez puissant pour la filtration. Lorsque cela colmate, mettre 20 à 40s d'ultrasons et rincer abondamment, en même temps, avec la pissette. Le succès de cette opération est basé sur la coordination entre les ultrasons et la pissette. Il est important de bien gérer le temps des ultrasons, car l'abus peut casser les microorganismes.
- **12-** Récupérer le résidu, une fois bien lavé, avec la pissette dans un tube à fond conique de 50ml en polypropylène. Bien froisser le filtre entre les doigts pour décoller éventuellement les micro-organismes qui pourraient rester sur le filtre.
- **13-** Centrifuger les tubes, 7mn à 2500tr/mn, éliminer le surnageant à l'aide de la trompe à vide munie de l'embout à 90°. Transvaser le résidu avec de l'eau distillée dans un tube à fond conique de 8cc en plastique. Centrifuger les tubes, 7mn à 2500tr/mn, éliminer le surnageant toujours avec la trompe à vide. Le résidu est prêt pour le montage.

14 – En fonction du caractère organique du résidu il est parfois nécessaire d'effectuer un traitement supplémentaire au HNO3 : Séparation du culot en 2 puis sur une moitié, attaque HNO3 2mn, filtration 10μ, 20s Ultra son, 2mn HNO3, filtration 10μ

Montage

Montage à la glycérine bidistillée phénolée (lames mobiles)

Cette technique de montage est utilisée pour l'étude des grains de pollen.

14b- Poser une lame sur la plaque chauffante (T° 200°C-250°C), mettre sur celle-ci une goutte de glycérol (*voir annexes*), ajouter quelques gouttes de résidus, doser suivant la concentration voulue. Laisser évaporer l'eau. Pendant ce temps préparer la lamelle en posant sur les longueurs de la lamelle de l'histolaque. Une fois l'évaporation terminée poser la lamelle sur la lame. Retirer la lame de la plaque chauffante et luter les deux côtés restants.

Conservation

15- Pour la conservation remplir les tubes de 8cc d'eau distillée, puis ajouter quelques gouttes de glycérine bidistillée phénolée

Annexes

• Fournisseur des pastilles de lycopodes

Lund University
Department of Geology
Quaternary Sciences
Sölvegatan 12
SE-223 62 Lund
Sweden

Fax: 46-46-2224830

• Fournisseur des filtres de 10µm

Saulas et Cie 5, rue des epinettes BP 20 10160 Paisy cosdon fax: 03 25 40 74 87

• Préparation de la gélatine glycérinée

Mettre dans un bécher 10g de gélatine plus 34,2cc d'eau distillée. Laisser reposer pendant 2h à froid sans agitation. Ensuite, ajouter 51cc de glycérol à 98% plus 1g de phénol. Chauffer jusqu'à complète dissolution. La solution se solidifie à froid. Lors du montage mettre le bécher sur la plaque chauffante.

• Préparation du glycérine bidistillée phénolée pour la conservation

Mettre dans 1I de glycérol à 98% 1% de phénol.

6.2. Description des échantillons et des traitements

Date	Coul (N,B,R,V)	Sol Exotique (lycopodes .)	Nombre grains	Num (1-8)	NOM DE LA CAROTTE	TRONCON	Prof top	VOL	HCL	HF 48%	HF 70%	filtration 5/10/15 microns	filtration Ultrason(s)	Type de montage (G,L)	Date de montage	NB de lame	Résidu (I,M,F,N)
7/01/20	V	lycopodes	20848	1	CHARTRES	PLV	1817	4	Х	Х	Х	10	20	L	14/1/20	1	F
7/01/20	V	lycopodes	20848	2	CHARTRES	PLV	1825	4	Х	Х	Х	10	20	L	14/1/20	1	F
17/12/2019	В	lycopodes	20848	F	CHARTRES	PLV	1765	4	Х	Х	Х	10	40	L	14/1/20	1	М
17/12/2019	В	lycopodes	20848	G	CHARTRES	PLV	1766	4	Х	Х	X	10	40	L	14/1/20	1	М
17/12/2019	В	lycopodes	20848	Н	CHARTRES	PLV	1815	4	Х	Х	Х	10	40	L	14/1/20	1	M

Figure 7. Description des traitements réalisés pour l'extraction pollinique (UMR EPOC).